


waterpik waterflosser

Model WP-100/105/110/112
Modèle WP-100/105/110/112

QUICK START GUIDE/GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


**1 Prepare the Reservoir:
Préparation du réservoir :**

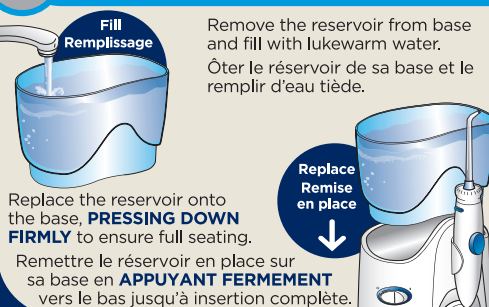

Fill Remplissage
Remove the reservoir from base and fill with lukewarm water.
Ôter le réservoir de sa base et le remplir d'eau tiède.

Replace Remise en place
Replace the reservoir onto the base, **PRESSING DOWN FIRMLY** to ensure full seating.
Remettre le réservoir en place sur sa base en **APPUYANT FERMEMENT** vers le bas jusqu'à insertion complète.

**2 Insert Tip:
Insertion de l'embout :**

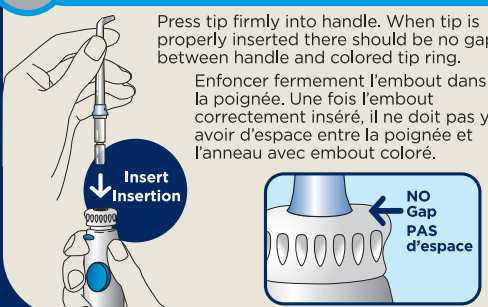


Press tip firmly into handle. When tip is properly inserted there should be no gap between handle and colored tip ring.
Enfoncer fermement l'embout dans la poignée. Une fois l'embout correctement inséré, il ne doit pas y avoir d'espace entre la poignée et l'anneau avec embout coloré.

Insert Insertion
NO Gap PAS d'espace

**3 Prime Unit (First Time Use Only):
Préparation de l'appareil (première utilisation uniquement) :**

Prior to Very First Use of Unit, Prime Unit: Set pressure control dial on base to **high**, point the handle and tip into sink. Turn unit **ON** until water flows from the tip, turn unit **OFF**.

Avant une première utilisation, préparez l'appareil : Placer la commande de contrôle de la pression située sur la base sur **high (élevé)**, en orientant la poignée et l'embout vers le lavabo. Mettre l'appareil en **MARCHE** jusqu'à ce que de l'eau s'écoule par l'embout. **ÉTEINDRE** l'appareil.

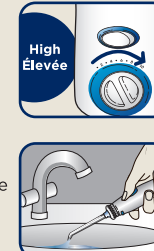

High Élevée
Low Basse

Pause Pause

**4 Adjust Pressure and Pause Control:
Réglage de la pression et de la commande de pause :**

For first time users, adjust pressure control to **lowest position**. Gradually increase pressure to your liking.
Lors de la première utilisation, régler la pression de façon à ce qu'elle soit **la plus basse possible**. Augmenter graduellement la pression en fonction de vos préférences.

You can temporarily stop water flow by pressing the pause button on the handle.
Vous avez la possibilité d'interrompre temporairement le débit d'eau en appuyant sur le bouton pause qui se trouve sur la poignée.

continued on back / Suite au verso

This device is only compatible with a voltage system of 120VAC, 60Hz. Do not plug this device into a voltage system that is different.
Cet appareil est uniquement compatible avec un système de tension de 120 VCA, 60 Hz. Ne pas le brancher dans un système de tension différent.

**5 On/Off Procedure:
Procédure de mise en marche/arrêt :**

**Always place tip in mouth before turning unit on.
Toujours placer l'embout dans la bouche avant de mettre l'appareil en marche.**


Lean over sink and close lips enough to prevent splashing, while still allowing water to flow from mouth into the sink. Turn unit **ON**.
Se pencher au-dessus du lavabo et pincer les lèvres suffisamment pour éviter toute éclaboussure, tout en permettant à l'eau de s'écouler de la bouche dans le lavabo. Mettre l'appareil en **MARCHE**. Always **PAUSE** or turn unit **OFF** before removing tip from mouth. Toujours appuyer sur **PAUSE** ou arrêter l'appareil avant de **RETIRER** l'embout de la bouche.



**6 Technique Tips for Best Results:
Conseils d'utilisation pour un résultat optimal :**

Aim the tip just above the gum line at a 90 degree angle. Pointer l'embout juste au-dessus de la ligne gingivale à un angle de 90 degrés.


Starting with the back teeth, follow the gum line and pause briefly between teeth. Continue until all areas around and between teeth have been cleaned.
Suivre la ligne gingivale en faisant une courte pause entre chaque dent. Commencer par les dents du fond. Continuer ainsi jusqu'à ce que les zones entre et autour de chaque dent aient été nettoyées.

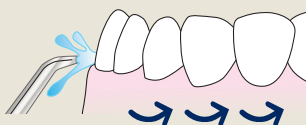

**7 Tip Removal:
Retrait de l'embout :**

Push the tip eject button on the handle. The control knob will rise, releasing the tip. Remove the tip.
Enfoncer le bouton d'éjection de l'embout sur la poignée. Le bouton de commande se soulevra, en dégageant l'embout. Retirer l'embout.

Caution: Do not press tip eject button while unit is running.
Mise en garde : Ne pas appuyer sur le bouton d'éjection de l'embout lorsque l'appareil est en marche.

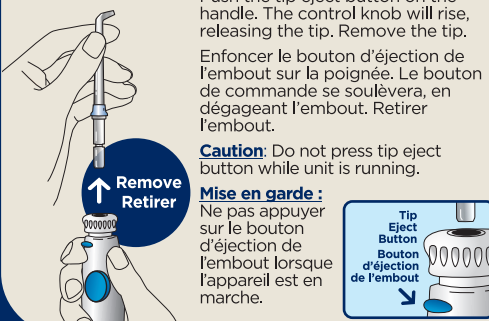

Remove Retirer
Tip Eject Button Bouton d'éjection de l'embout