

# waterpik® waterflosser®


English

## QUICK START GUIDE


Review full instruction book prior to first use

**1 FIRST USE**


Fill reservoir with warm water and replace it firmly on the base.

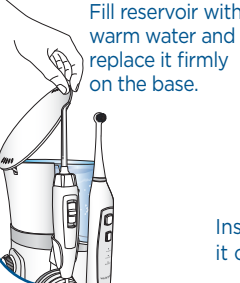

Insert tip firmly until it clicks into place.

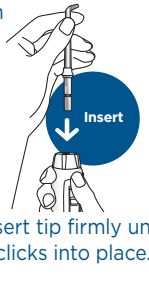


Turn pressure to high, point tip into sink, turn power and water switches on until water flows. Then turn off.



**2 START WATER FLOSSING**


**TO AVOID MESS: PLACE THE TIP IN YOUR MOUTH BEFORE TURNING UNIT ON**

Turn power and water on. Start on low pressure and increase to your liking.

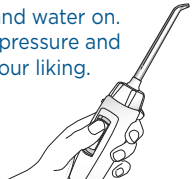


**3 LEAN OVER SINK**

Close lips enough to prevent splashing, while still allowing water to flow from mouth into the sink.



**4 TECHNIQUE**

Aim water at the gumline at a 90° angle. Follow the gumline and pause briefly between teeth.



**HOW TO**

**SEE HOW TO VIDEO:**  
[waterpik.com/HowTo811](http://waterpik.com/HowTo811)

Model WP-810/811/812

This device is only compatible with voltages of 120 VAC, 60Hz

©2016 Water Pik, Inc.

1.800.525.2774 (USA) 1.888.226.3042 (Canada)

# waterpik® waterflosser®


Français

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


Lisez l'intégralité du manuel d'instructions avant utilisation

**1 PREMIÈRE UTILISATION**


Remplissez le réservoir avec de l'eau tiède et remettez-le fermement en place sur son socle.

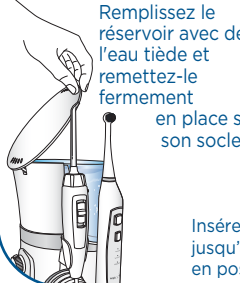

Régler la pression sur « élevé », orienter l'embout vers le lavabo, mettre l'appareil et l'alimentation en eau en marche jusqu'à ce que de l'eau s'écoule, puis éteindre.

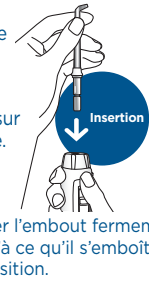


Insérer l'embout fermement jusqu'à ce qu'il s'emboîte en position.



**2 DÉMARRAGE DE L'HYDROPROPULSEUR**

**POUR ÉVITER LES ÉCLABOUSSURES : PLACEZ TOUJOURS L'EMBOUT DANS LA BOUCHE AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ.**

Mettez l'appareil sous tension et réglez l'interrupteur d'alimentation en eau sur ON (marche). Démarrez sur le réglage le plus bas et augmentez la pression selon vos préférences.




**3 PENCHEZ-VOUS AU-DESSUS DU LAVABO**

Gardez vos lèvres suffisamment fermées pour empêcher les éclaboussures, tout en laissant l'eau s'écouler de votre bouche dans le lavabo.



**4 TECHNIQUE**

Dirigez le jet d'eau vers la ligne gingivale à un angle de 90°. Suivez la ligne gingivale et faites de courtes pauses entre les dents.



**MODE D'EMPLOI**

**REGARDEZ UNE VIDÉO EXPLIQUANT LE FONCTIONNEMENT :**  
[waterpik.com/HowTo811](http://waterpik.com/HowTo811)

Modèle WP-810/811/812

Cet appareil est compatible avec les valeurs de tension de 120 VCA, 60 Hz.

20022179-F AA

1.800.525.2774 (É.-U.) 1.888.226.3042 (Canada)