

waterpik® waterflosser®

English

QUICK START GUIDE


Review full instruction book prior to first use

1 FIRST USE

Fill reservoir with warm water and replace it firmly on the base.

Turn pressure to high, point tip into sink, turn power and water switches on until water flows. Then turn off.

Insert tip firmly until it clicks into place.

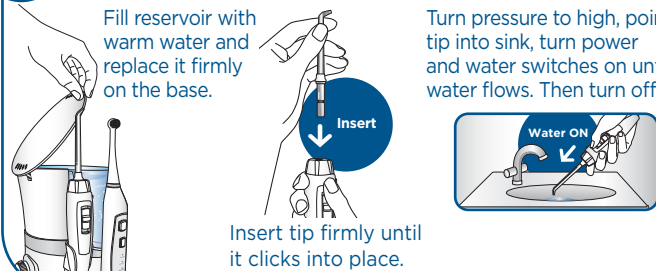


Insert

Water ON

2 START WATER FLOSSING


TO AVOID MESS: PLACE THE TIP IN YOUR MOUTH BEFORE TURNING UNIT ON

Turn power and water on. Start on low pressure and increase to your liking.

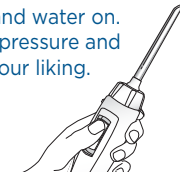


3 LEAN OVER SINK

Close lips enough to prevent splashing, while still allowing water to flow from mouth into the sink.



4 TECHNIQUE

Aim water at the gumline at a 90° angle. Follow the gumline and pause briefly between teeth.



HOW TO

SEE HOW TO VIDEO:
waterpik.com/HowTo811

waterpik® waterflosser®

Français

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


Lisez l'intégralité du manuel d'instructions avant utilisation

1 PREMIÈRE UTILISATION

Remplissez le réservoir avec de l'eau tiède et remettez-le fermement en place sur son socle.

Régler la pression sur « élevé », orienter l'embout vers le lavabo, mettre l'appareil et l'alimentation en eau en marche jusqu'à ce que de l'eau s'écoule, puis éteindre.

Insérer l'embout fermement jusqu'à ce qu'il s'emboîte en position.

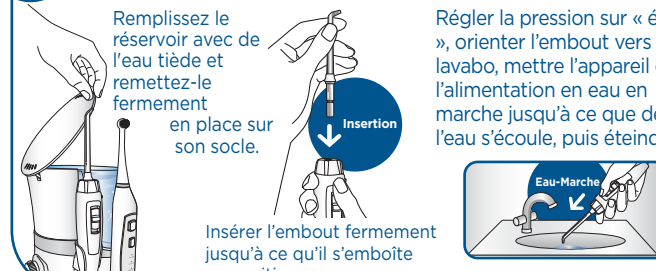


Insertion

Eau-Marche

2 DÉMARRAGE DE L'HYDROPROPULSEUR

POUR ÉVITER LES ÉCLABOUSSURES : PLACEZ TOUJOURS L'EMBOÛT DANS LA BOUCHE AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ.

Mettez l'appareil sous tension et réglez l'interrupteur d'alimentation en eau sur ON (marche). Démarrez sur le réglage le plus bas et augmentez la pression selon vos préférences.

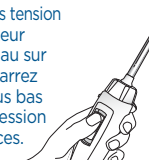


3 PENCHEZ-VOUS AU-DESSUS DU LAVABO

Gardez vos lèvres suffisamment fermées pour empêcher les éclaboussures, tout en laissant l'eau s'écouler de votre bouche dans le lavabo.



4 TECHNIQUE

Dirigez le jet d'eau vers la ligne gingivale à un angle de 90°. Suivez la ligne gingivale et faites de courtes pauses entre les dents.



MODE D'EMPLOI

REGARDEZ UNE VIDÉO EXPLIQUANT LE FONCTIONNEMENT :
waterpik.com/HowTo811

Model WP-810/811/812

This device is only compatible with voltages of 120 VAC, 60Hz

©2016 Water Pik, Inc.

1.800.525.2774 (USA) 1.888.226.3042 (Canada)

Modèle WP-810/811/812

Cet appareil est compatible avec les valeurs de tension de 120 VCA, 60 Hz.

20022179-F AA

1.800.525.2774 (É.-U.) 1.888.226.3042 (Canada)