

waterpik®


SIDEKICK™

Quick Start Guide – WF-04

For a how-to video, product registration, and additional support visit waterpik.com/WelcomerWF

Step 1

Unit Prep

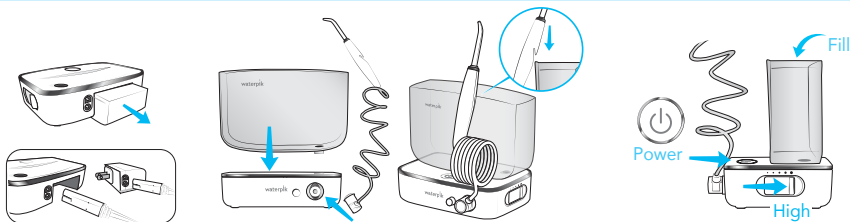


A. Connect power cord to power supply and to base unit. Plug into electrical outlet.

B. Assemble unit as shown.

C. Fill reservoir with warm water and place it firmly on the base. Slide pressure to high, point tip into sink, turn power **ON** until water flows. Turn power **OFF**.

Step 2

Water Floss

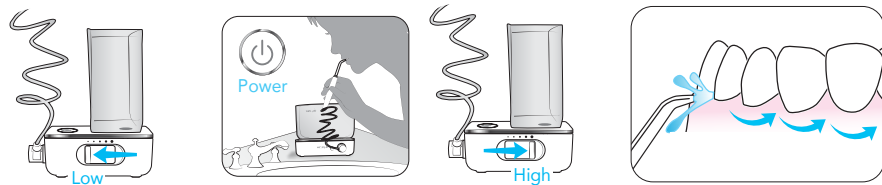

A. Slide to lowest pressure setting.

B. Place tip in mouth and close lips enough to prevent splashing. Turn power **ON** allowing water to flow from mouth into the sink. Increase pressure to your liking.

C. Aim water at the gumline at a 90 degree angle. Follow the gumline and pause briefly between teeth.

waterpik®


SIDEKICK™

GUÍA DE INICIO RÁPIDO – WF-04

Para ver un video práctico, registrar el producto y recibir apoyo adicional, visite waterpik.com/WelcomWF

Paso 1

Preparación de la unidad

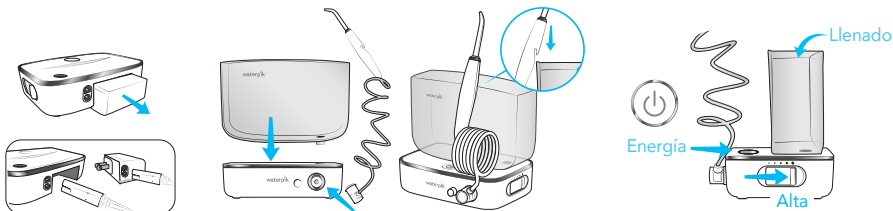


A. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación y a la base de la unidad. Enchufe en el tomacorriente.

B. Ensamble la unidad como se muestra.

C. Llene el depósito con agua tibia y colóquelo firmemente en la base. Deslice la presión a alta, apunte la boquilla hacia el lavabo y encienda la unidad (ON) hasta que fluya el agua. Apague la unidad (OFF).

Paso 2

Irrigación bucal

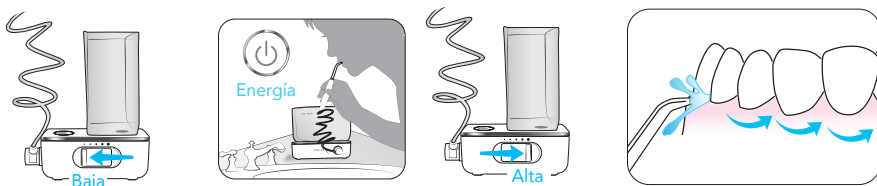

A. Deslice hasta la configuración de la configuración de presión más baja.

B. Coloque la boquilla en la boca y cierre los labios lo suficiente para evitar salpicaduras. Encienda la unidad (ON) permitiendo que el agua fluya de la boca al lavabo. Aumente la presión a su gusto.

C. Apunte el agua hacia la línea de la encía en un ángulo de 90 grados. Siga la línea de la encía y haga una pausa breve entre los dientes.