

waterpik Water Flosser Model WP-360


L'hydropropulseur Modèle WP-360

QUICK START GUIDE/GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1 Charge Unit for 24 Hours Prior to First Use.
Charger l'appareil pendant 24 heures avant la première utilisation.

Turn power switch **OFF**, plug power cord into outlet, and insert the charging cord into the unit.

ÉTEIGNEZ l'interrupteur, branchez le fil et insérez le cordon de chargement dans l'unité.

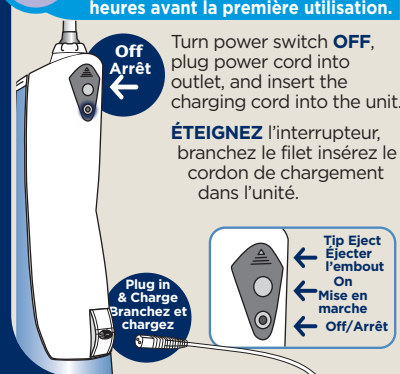

Off / Arrêt
Plug in & Charge / Branchez et chargez
Tip Eject / Éjecter l'embout
On / Mise en marche
Off / Arrêt


2 Insert Tip: Insertion de l'embout :

Select the appropriate tip and insert into the unit. Press firmly until the tip clicks into place. **To remove tip, push the tip eject button.**

Sélectionnez l'embout approprié et insérez-le dans l'unité. Appuyez fermement jusqu'à ce que l'embout s'enclenche. **Pour retirer l'embout, appuyez sur le bouton d'éjection l'embout.**

Note: For first time use, use blue **low pressure** tip. To increase water pressure, use the clear **high pressure** tip.

Remarque: Pour la première utilisation, utilisez l'**embout à basse pression** de couleur bleue. Pour augmenter la pression de l'eau, utilisez l'**embout haute pression** transparent.

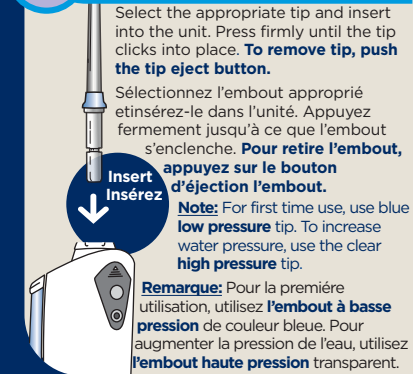

Insert / Insérez


3 Fill the Reservoir: Remplissez le réservoir :

Unplug charging cord from unit prior to filling with water and during use.

Débranchez le cordon de chargement de l'unité avant de la remplir d'eau et pendant l'utilisation.

Lift the flip top on reservoir and fill with lukewarm water. Refill as needed.

Soulevez le couvercle au sommet du réservoir et remplissez-le d'eau tiède. Remplir au besoin.

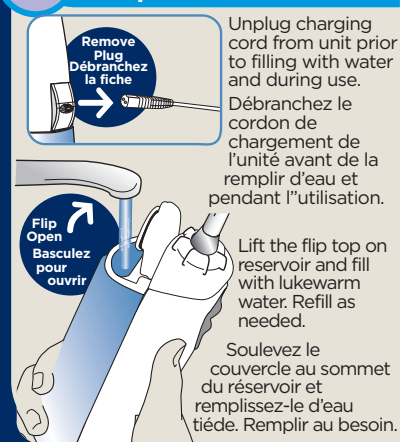

Remove Plug / Débranchez la fiche
Flip Open / Basculez pour ouvrir

4 Usage: / Utilisation :

Caution: Do not press tip eject button while unit is running.

Mise en garde: N'appuyez pas sur le bouton d'éjection de l'embout lorsque l'unité est en marche.


Be sure tip is fully engaged before turning **ON**.

Vérifiez que l'embout est bien enclenché avant de démarrer l'unité.

Note: **OFF** button is located directly below the **ON** button.

Remarque: le bouton **OFF** se trouve juste en dessous du bouton **ON**.

continued on back / suite au verso

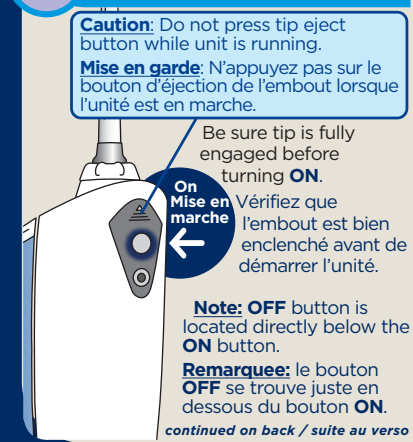

On / Mise en marche

5 On/Off Procedure: / Marche/Arrêt :


Always place tip in mouth before turning unit on.
Veillez à toujours mettre l'embout dans la bouche avant de démarrer l'unité.

Lean over sink and close lips enough to prevent splashing, while still allowing water to flow from mouth into the sink. Turn unit **ON**.

Mettez-vous au dessus d'un évier et fermez la bouche suffisamment de façon à éviter toute éclaboussure tout en laissant couler l'eau de votre bouch dans l'évier. Démarrez l'unité.

Keep unit upright during use to ensure continuous water flow.

Maintenez l'unité en position verticale pendant l'utilisation pour garantir un jet continu

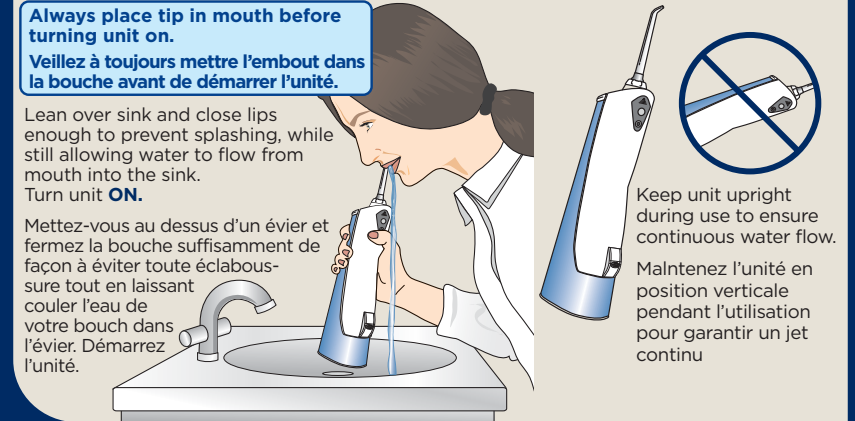

6 Technique Tips for Best Results: / Conseils pour de meilleurs résultats:

Aim the tip just above the gumline at a 90 degree angle.

Dirigez l'embout pour qu'il soit juste au dessus de la ligne gingivale, à un angle de 90 degrés.

Starting with the back teeth, follow the gumline and pause briefly between teeth. Continue until all areas around and between teeth have been cleaned.

Commencez par les dents du fond et suivre la ligne gingivale et maintenez le jet un instant entre les dents. Continuez jusqu'à ce que toutes les zones autour et entre les dents soient nettoyées.

